


# ISTRUZIONI QUICKTALKER 7 - QUICKTALKER 12 - QUICKTALKER 23

## CARATTERISTICHE DI BASE

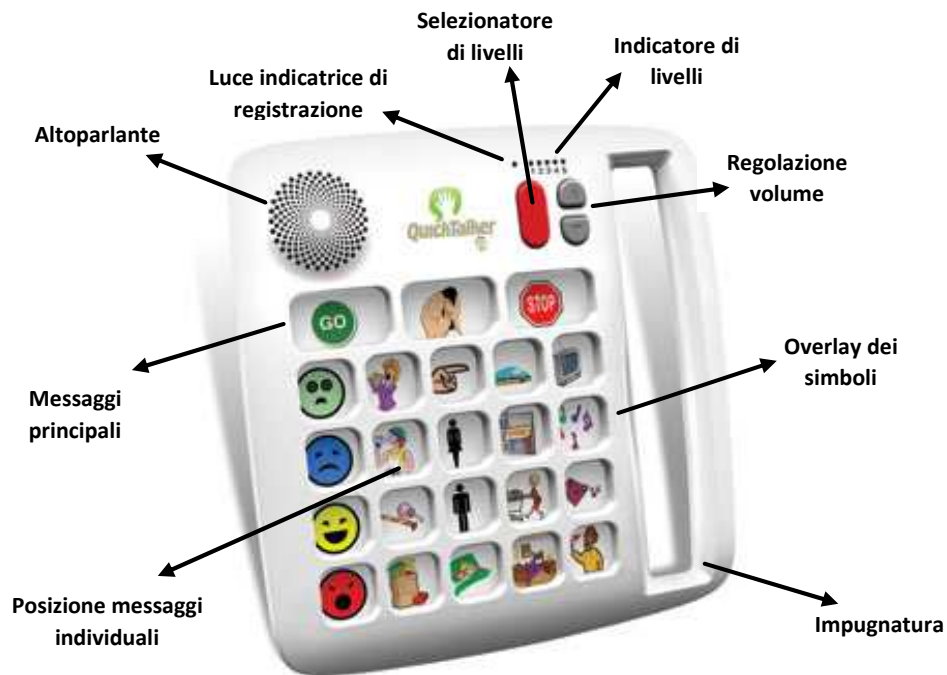

Sul retro ci sono:

- Pulsante per la registrazione
- Accensione e spegnimento (on/off)
- Scomparto batteria

### 1. ACCENDERE IL QUICKTALKER™

Girare il dispositivo sul retro e inserire, nell'apposito scomparto, 4 batterie AA. Posizionare la levetta su ON per accendere il dispositivo

### 2. SELEZIONARE IL LIVELLO

Selezionare il livello (da 1 a 5) premendo il pulsante rosso nella parte anteriore del dispositivo.

### 3. REGISTRARE I MESSAGGI

- Entrare in modalità "Registra"  
Tenere premuto il pulsante "RECORD" sul retro del dispositivo finché si accende la luce rossa, poi rilasciare
- Registrare i messaggi  
Tenere premuta la locazione alla quale si vuole abbinare il messaggio, iniziare a parlare dopo il beep, infine rilasciare.  
Consiglio: Parlare per 6-8 secondi dal microfono con una voce forte e chiara.
- Uscire dalla modalità "Registra"  
Premere e rilasciare il pulsante "RECORD". La luce si spegnerà.  
Nota: il dispositivo uscirà automaticamente dalla modalità "Registra" dopo 20 secondi in cui non vi è alcuna attività.

#### 4. RIPRODURRE UN MESSAGGIO

Premere la locazione desiderata per riprodurre un messaggio  
Nota: premendo un'altra locazione verrà interrotto il messaggio corrente.



Per regolare il volume, premere le frecce grigie.

Quando una locazione viene premuta la luce di registrazione lampeggerà di colore giallo se la locazione è vuota; rossa se vi è stato registrato un messaggio.



#### 5. CANCELLARE I MESSAGGI

- Singola locazione  
Entrare nella modalità "Registra", poi premere e rilasciare velocemente la locazione
- Livelli  
Tener premuto il pulsante RECORD per 10 secondi e tutti i messaggi sul corrente livello verranno cancellati. Rimarranno i messaggi principali
- Cancellare tutto  
Tenere premuto il pulsante RECORD per 30 secondi e TUTTI i messaggi presenti in QUICKTALKER verranno cancellati.

#### 6. CARATTERISTICHE AVANZATE

I messaggi principali rimarranno gli stessi per tutti i livelli. L'ultimo messaggio registrato verrà riprodotto. Tenendo premuti i pulsanti rossi RECORD e LEVELS simultaneamente per 5 secondi, tutte le luci lampeggeranno due volte. Ripetere l'operazione per bloccare i comandi.

#### 7. GARANZIA E CURA

Per pulire utilizzare un panno leggermente umido

Il prodotto è protetto da una garanzia di due anni. Questa garanzia è contro i difetti dei materiali e di fabbricazione per due anni dalla data dell'ordine.