

## HELPICALL 3 MANUALE



Il prodotto si compone di due elementi: Trasmittitore e Ricevitore;  
Il sistema trasmette su frequenza libera portante di 433,93 Mhz +- 280KHz valida in Europa.  
Il volume del suono che viene emesso dal ricevitore è regolabile su quattro livelli da 30 a 110 dB.  
E' inoltre presente un feedback visivo sul ricevitore.  
Si possono scegliere fino a 52 suonerie differenti.  
La distanza massima di funzionamento tra il trasmettitore ed il ricevitore è di 300 m in campo aperto.

Sul Trasmittitore è presente il tasto per l'attivazione della chiamata dalla superficie di attivazione di 2 cm ed un ingresso jack femmina da 3,5" per sensori di comando esterni.  
Per attivare la chiamata occorre premere il tasto di attivazione oppure premere la superficie di un sensore esterno connesso all'ingresso jack femmina. Indipendentemente dal tipo di attivazione comparirà un led blu sul tasto di attivazione a conferma dell'avvenuta "partenza" del segnale di comando del trasmettitore.  
**Nota bene! se l'attivazione viene mantenuta premuta il segnale di comando verrà inviato a ripetizione finchè non si rilascerà il tasto di comando.**



Il ricevitore è l'unità ricevente del segnale di attivazione ed aziona l'emissione sonora del campanello



Tasto controllo  
volume

Tasti freccia su e  
freccia giù

**CAMBIARE IL VOLUME:** premere il tasto controllo volume fino a raggiungere il livello desiderato, il volume è un ciclo loop in 4 livelli

**CAMBIARE SUONERIA:** ci sono 52 suonerie a disposizione, per ascoltare e sceglierle occorre premere i tasti freccia su e freccia giù, raggiunta la suoneria desiderata mantenere premuto per 5 secondi il tasto controllo volume finché non si sentirà la conferma di un beep sordo.

#### CAMBIARE LE BATTERIE AL RICEVITORE



Girare il dispositivo



Aprire il portellino con l'aiuto di un piccolo cacciavite a taglio


### CAMBIARE LE BATTERIE AL TRASMETTITORE:



Con l'aiuto di un cacciavite a taglio aprire delicatamente la parte posteriore facendo delicatamente leva



Svitare le due viti con apposito cacciavite a stella

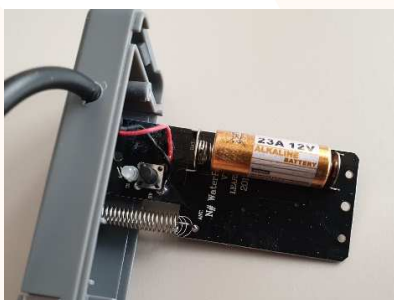

Girare delicatamente il dispositivo in modo da rendere accessibile la pila.

1 TECHNICAL DATA	
Model No.	39333, 39334, 39335, 41758, 41759, 41760, 42807
Voltage of receivers (plug-in version)	AC 220V / 50Hz/60Hz
Voltage of receivers (battery version)	DC 4.5A (3 x 1.5V AAA batteries)
Power consumption per receiver	<0.5W
Power consumption per transmitter	<10mW
IP protection class	IP44
Battery type for transmitter	12V 23A battery (transmitter A); 3V lithium CR2032 button cell (transmitter B)
Working range	Up to 300m
Number of ring tones	52 pcs
Volume range	30 - 110dB (4 levels)
Expandable with additional receiver / transmitter	Yes
Working frequency	433.92 Mhz + 280KHz
Working temperature	-30°C - 70°C

Prodotto e Distribuito in Italia da:

Helpicare by Didacare srl  
Via S.C.Barbieri 12  
4017 San Giovanni in Persiceto (BO)  
Tel 0516810450  
Fax 0516811287

[www.helpicare.com](http://www.helpicare.com)

